


Kuhner
ei. Ku
n Bier
uhner Bier



Bedienungsanleitung

 **Mode d'emploi**

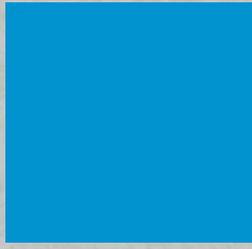

Duschstuhl
Chaise de douche

KB, mit Lehne / avec accoudoirs

Vielen Dank, dass Sie sich für den Duschstuhl 9400-A von DIETZ entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit Ihrem neuen 9400-A starten. Sie erhalten darin wichtige Hinweise, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge vollständig zu nutzen.

Darüber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebssicherheit sowie einer bestmöglichen Werterhaltung Ihres Duschstuhls dienen.


Sollten Sie weitergehende Informationen zu Ihrer Versorgung wünschen, so wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitäts-Fachhaus.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Handhabung des 9400-A.



HINWEIS

Zur größeren Darstellung steht Ihnen die Bedienungsanleitung unter **www.dietz-reha.de** im PDF-Format zur Verfügung.

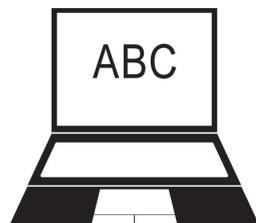

01 Wichtige Informationen		06 Hinweise zum Gebrauch	
Allgemeines	5	Sicherheitshinweise	11
Zweckbestimmung	5	Typenschilder /Seriennummer/ Warnhinweise .	11
Indikationen	5	Reinigung /Pfleghinweise.	12
Kontraindikationen	5	Weitergabe und Wiedereinsatz	12
Zeichen und Symbole	5	Entsorgung	13
02 Produktbeschreibung		07 Gewährleistungen	
Lieferumfang und Lieferzustand	6	Garantie	13
Aufbau des Duschstuhls	6	Konformitätserklärung	13
03 Montagehinweise		Verantwortlichkeit	13
Vorbemerkung	7	Haftung	13
Montagehinweise	7	Garantie-Abschnitt	14
04 Duschstuhl verwenden			
Duschstuhl auseinander falten	8		
Duschstuhl zusammenfallen	8		
Sitzhöhe verstellen	9		
Benutzung	9		
05 Technische Daten			
Technische Daten	10		
Wartung	10		

ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor. Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung der DIETZ GmbH. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller. Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei der DIETZ GmbH.

ZWECKBESTIMMUNG

Der Duschstuhl findet seine Anwendung im häuslichen und im stationären Bereich, vorwiegend für die Benutzung in Dusch- Waschräumen. Der Duschstuhl ist ausschließlich für den Innenbereich und eine max. Benutzerlast von 120 kg konzipiert. Als Aufstiegshilfe oder zu ähnlichen Zwecken darf der Duschstuhl nicht verwendet werden.

INDIKATIONEN

Die Verwendung des Duschstuhls ist angezeigt bei

- ▼ Stand und Stehunsicherheit
- ▼ Stand und Stehunsicherheit
- ▼ Gliedmaßenverlust/- defekt /-deformation der unteren Extremitäten.

KONTRAINDIKATIONEN

Die Verwendung des Duschstuhls ist nicht angezeigt bei

- ▼ Wahrnehmungsstörungen
- ▼ Starken Gleichgewichtsstörungen
- ▼ Sitzunfähigkeit
- ▼ einem Benutzergewicht größer 120 kg.

ZEICHEN UND SYMBOLE



WARNUNG

Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden. Sie machen darauf aufmerksam, dass Verletzungsgefahr besteht.



ACHTUNG

Gefahrenhinweise auf mögliche Beschädigungen durch falsche Bedienung oder Anwendung.



HINWEIS

Tipps und Ratschläge, die die Verwendung von Funktionen erleichtern.

LIEFERUMFANG UND LIEFERZUSTAND

Der Lieferumfang beinhaltet:

- 1 Duschstuhl 9400-A, faltbar mit Arm- und Rückenlehne, Pad in grau nur bei Artikel 000221
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Verpackungs- und Transportkarton (wiederverwendbar)


Nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit gem. den Lieferunterlagen überprüfen.



ACHTUNG

Vor dem Auspacken die Verpackung überprüfen. Ist die Verpackung beschädigt, kann auch der Inhalt beschädigt sein. Ist der Inhalt erkennbar beschädigt, unverzüglich das Frachtunternehmen verständigen. **Folien nicht verbrennen!** Beim Verbrennen können giftige Gase entstehen.

AUFBAU DES DUSCHSTUHL

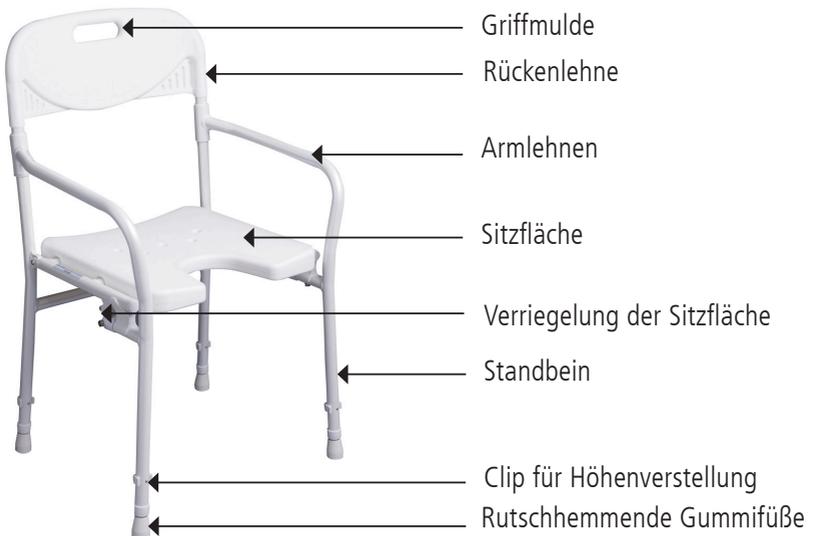

VORBEMERKUNG

Sie haben sich für ein technisch ausgereiftes und nach dem neuesten Stand der Technik konstruiertes und zuverlässiges Produkt aus unserem Haus entschieden. Für dieses Vertrauen bedankt sich DIETZ bei Ihnen.

Diese Bedienungsanleitung dient allen Anwendern, insbesondere dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für eine sichere und gefahrlose Nutzung des Duschstuhls.

Diese Anweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes.

Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und die Handhabungssicherheit beizubehalten, lesen Sie die Bedienungsanleitung, halten Sie die vorgegebenen Handlungsanweisungen ein und sorgen Sie dafür, dass die Bedienungsanleitung für die Benutzer erreichbar bleibt.

MONTAGEHINWEISE

Der Duschstuhl muss nach dem Auspacken montiert werden. Hierzu werden die Armlehnen auseinander gefaltet, die Sitzfläche eingerastet und mit dem Sicherheitsstift verriegelt. Zuletzt wird die Rückenlehne aufgesteckt. Die Montage und die Funktionsüberprüfung werden vom Fachhandel ausgeführt. Der Techniker beim Fachhändler passt den Duschstuhl dem jeweiligen Benutzer an.



ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den 9400-A montieren und benutzen.

DUSCHSTUHL AUSEINANDER FALTEN

1. Die Standbeine (Pfeil) aus der zusammengefalteten Position nach vorne schwenken.
2. Die Sitzfläche (Pfeil) nach oben schwenken, dann
3. die Sitzfläche so abklappen, dass die Rohre der Sitzfläche in die Aufnahme einrasten
4. alle 4 FüÙe müssen sicher aufstehen.

Den Duschstuhl so platzieren, dass der Duschstuhl ungehindert besetzt werden kann und noch genügend Bewegungsraum bleibt.

DUSCHSTUHL ZUSAMMENFALTEN

Zum Zusammenfalten:

1. Die Sitzfläche hochziehen,
2. die Armlehnen zur Seite schwenken,
3. die Sitzfläche nach unten klappen und
4. die Armlehnen zusammenfalten.



WARNUNG

Klemmgefahr! Beim Auseinanderfalten besteht Klemmgefahr für Hände, wenn die Sitzfläche abgeklappt wird; die Sitzfläche langsam und gefühlvoll klappen.




SITZHÖHE VERSTELLEN

Der Duschstuhl kann durch Verschieben der Füße in die gewünschte Höhe gebracht werden.

Dazu:

1. An den Füßen die Stift-Clips (2) herauslösen.
2. Die innen geführten Fußrohre (4) in die gewünschte Länge herausziehen oder hineindrücken und dabei die Bohrungen (1) von Innenrohr und Außenrohr zur Deckung bringen.
3. Die Stift-Clips durchstecken und am Rohr (3) einrasten lassen.

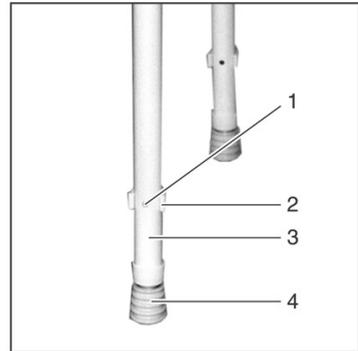

Die Stift-Clips müssen unbedingt außen am Rohr einrasten. Nur dann ist gewährleistet, dass die Stifte sicher durch die Bohrungen geführt sind und dem Duschstuhl die notwendige Stabilität geben.

Wenn die Stifte wieder sichtbar und spürbar aus der Bohrung ausgetreten sind, ist der Duschstuhl sicher vor ungewolltem Zusammenschieben der Rohre.



WARNUNG

Kipp und Ausrutschgefahr!

Alle vier rutschhemmenden Gummifüße (4) müssen die gleiche Länge aufweisen.

BENUTZUNG

Duschstuhl so hinstellen, dass

- alle vier Füße sicher stehen und
- der Duschstuhl ungehindert besetzt werden kann und
- noch genügend Bewegungsraum bleibt.
- Immer in der Mitte des Duschstuhls sitzen
- Immer gerade auf den Duschstuhl setzen.

- Zum Hinsetzen oder Aufstehen die Hilfe der Betreuungsperson nehmen oder festhalten.

TECHNISCHE DATEN

	Einheit	9400-A
Farbe		Weiß
Sitzbreite*	cm	40
Sitztiefe*	cm	40
Sitzhöhe*	cm	46-53
Gesamtlänge	cm	53
Gesamtbreite	cm	52,5
Gesamthöhe	cm	88-95
Leergewicht	kg	4
Max. Belastbarkeit	kg	120
Art.-Nr.		000221** & 411221*

* ohne Pad

** mit Pad

WARTUNG

Der Duschstuhl ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Duschstuhl bitte dem Fachhandel übergeben.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Duschstuhls keine Gefahr aus.

Die verwendeten Materialien und die Konstruktion entsprechen den Anforderungen aus den EG-Richtlinien, dem Medizin- Produkte- Gesetz und den Normen für Medizinprodukte.

- ▼ Vor Nutzung des Duschstuhls kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt und funktionieren.
- ▼ Der Duschstuhl darf nur im Innenbereich und auf ebenem, festem Untergrund benutzt werden.
- ▼ Der Duschstuhl muss sicher auf allen vier Füßen stehen
- ▼ Bitte beachten Sie, dass sich bei einer Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen das Kipprisiko des Duschstuhls vergrößern kann.

TYPENSCHILDER /SERIENNUMMER/WARNHINWEISE

Typen- und Warnschilder auf dem Duschstuhl müssen lesbar bleiben. Beim 9400-A sind diese am unteren Rahmen der Sitzfläche angebracht. Bitte lassen Sie unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich von Ihrem Fachhändler ersetzen. Die Seriennummer, welche ein Produkt eindeutig identifiziert, befindet sich auf dem Typenschild.



WARNUNG

Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen. Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.

ACHTUNG:
NUR AUF FESTEM, EBENEM
UNTERGRUND EINSETZEN

REINIGUNG / PFLEGEHINWEISE

- Zur Reinigung reiben Sie den 9400-A Duschstuhl nach der Benutzung mit einem feuchten Lappen ab.
- Darüber hinaus sollte der Duschstuhl gelegentlich mit einem handelsübliches Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden.
- Korrosionsschutz ist gegeben durch den beschichteten Aluminiumrahmen. Um eine lange Lebensdauer zu erreichen empfiehlt es sich den Duschstuhl nach der Reinigung trocken zu reiben.



WARNUNG

Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfen, ätzenden Chemikalien zur Reinigung.

WEITERGABE UND WIEDEREINSATZ

Bei der Weitergabe und dem Wiedereinsatz des Duschstuhls denken Sie bitte daran, sämtliche, für eine sichere Handhabung notwendigen, technischen Unterlagen dem neuen Nutzer bzw. dem Fachhändler zu übergeben.

Der Duschstuhl muss vor dem Wiedereinsatz von einem Fachhändler gereinigt, desinfiziert und auf Schäden hin untersucht und freigegeben werden.

Bei der manuellen Aufbereitung eines gebrauchten Hilfsmittels alle Teile gründlich mit einem Flächendesinfektionsmittel abwischen. Besondere Sorgfalt empfiehlt sich bei der Desinfektion von Flächen mit häufigem Hände-/Hautkontakt, wie z. B. Griffen und Armlehnen.

Alternativ ist auch eine maschinelle Aufbereitung möglich. Vorteil: Der Hygienestandard ist immer gleichmäßig hoch.

Für beide Arten der Reinigung sind folgende Desinfektionsmittel materialverträglich:

- Aldehydfreie Desinfektion auf Basis von Alkoholen (max. 70 % Propylalkohol)
- Sauerstoffabspaltende Desinfektionsmittel
- Desinfektionsmittel auf Aldehydbasis



ACHTUNG

Achten Sie bei der Wiederaufbereitung und Desinfektion auf die Nutzungs- und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

ENTSORGUNG

Wenn Ihr Duschstuhl nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Wenn Sie die Entsorgung selber übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften Ihres Wohnortes.

GARANTIE

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Das Gleiche gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollständig ausgefüllte Garantie-Abschnitt mit einzureichen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für den Duschstuhl 9400-A erklärt die DIETZ GmbH in alleiniger Verantwortung die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

VERANTWORTLICHKEIT

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Duschstühle als verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden.

HAFTUNG

Die DIETZ GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen, die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht durch die DIETZ GmbH freigegeben wurden, haftet die DIETZ GmbH nicht. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Hersteller selbst durchzuführen.



Kuhn und Bieri AG

Medizingeräte und Verbrauchsmaterial für Heime, Spitäler und Spitex
Equipements et consommables médicaux pour homes, hôpitaux et soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

kuhnbieri.ch