

Quick Start Guide




138040508-1.1

DE Schnellstartanleitung

FR Guide de démarrage rapide

EN Quick start guide

IT Guida rapida

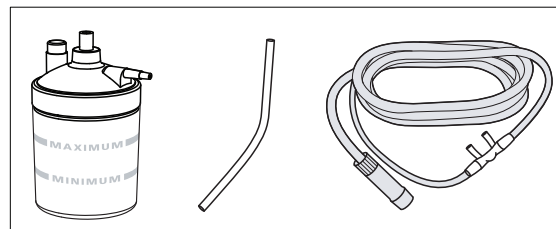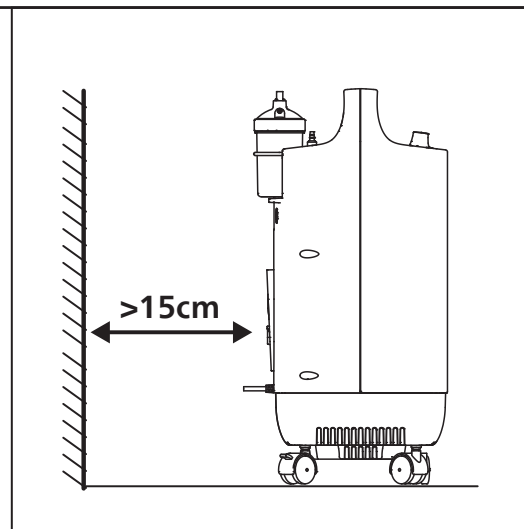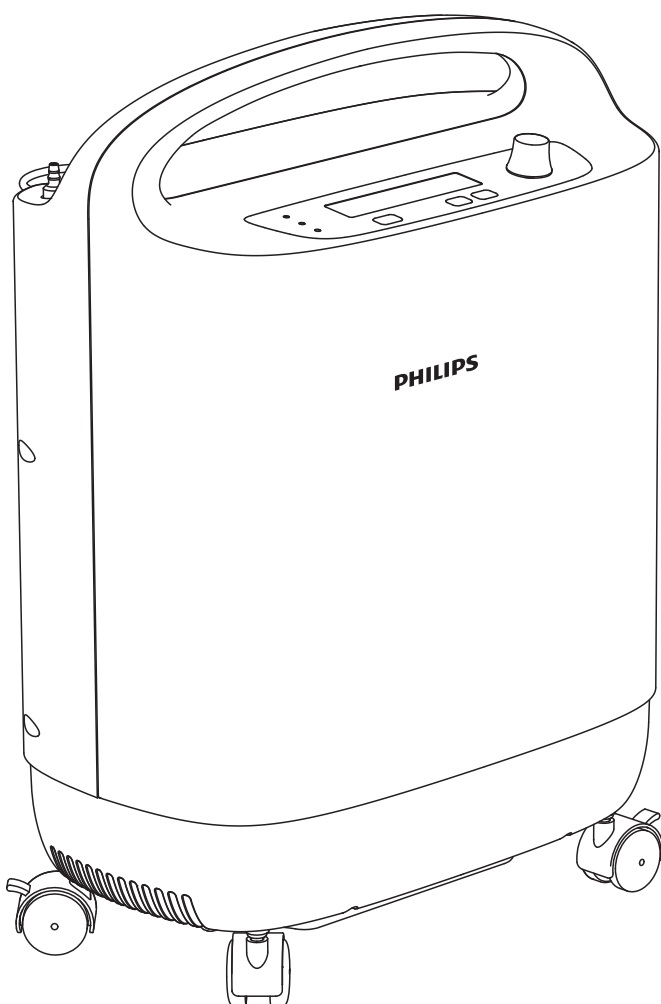





DE Die Befeuchterflasche, der Luftanschlussschlauch und die Nasenkanüle sind optionale Zubehörteile. Die Abbildungen und Anweisungen hierzu dienen ausschliesslich als Orientierungshilfe.





FR Le flacon humidificateur, le tube d'air de connexion et la canule nasale sont des accessoires en option. Les illustrations et les instructions les concernant sont fournies à titre indicatif uniquement.


EN The humidifier bottle, connecting air tube, and nasal cannula are optional accessories. Illustrations and instructions for them are for reference only.

IT La bombola dell'umidificatore, il tubo dell'aria di collegamento e la cannula nasale sono accessori opzionali. Le illustrazioni e le istruzioni relative sono fornite esclusivamente a titolo indicativo.



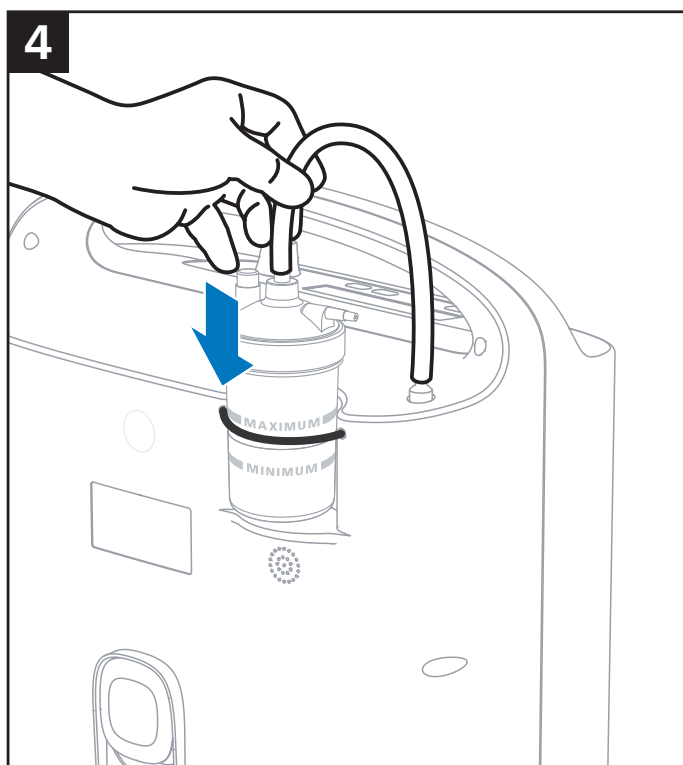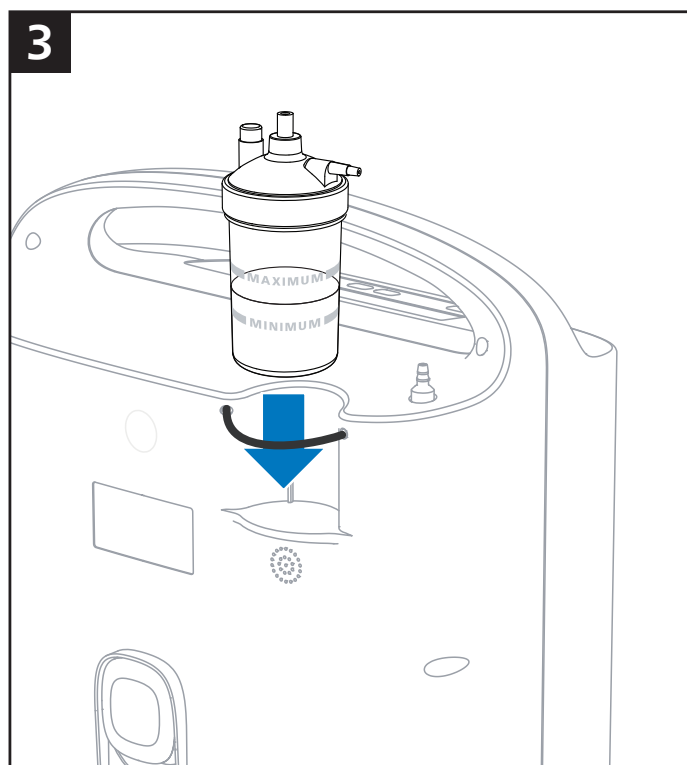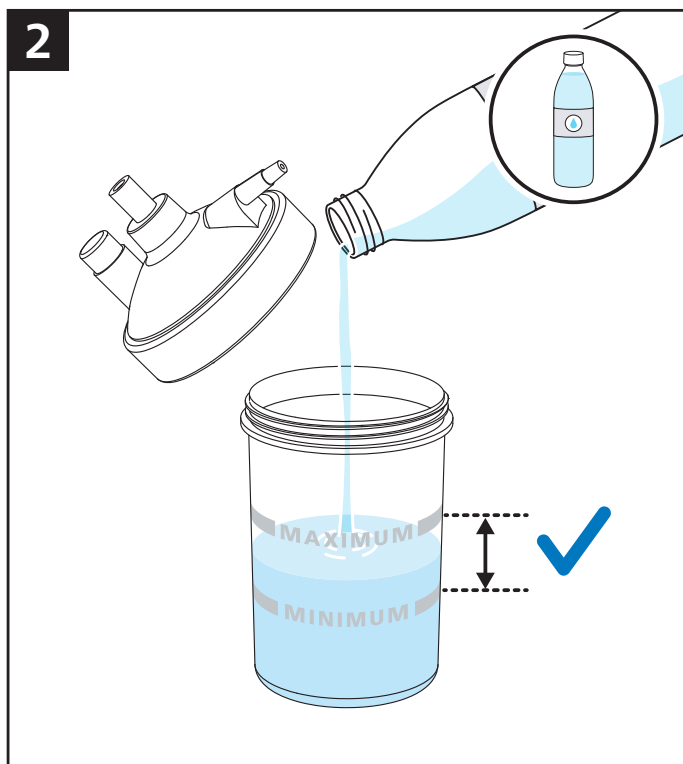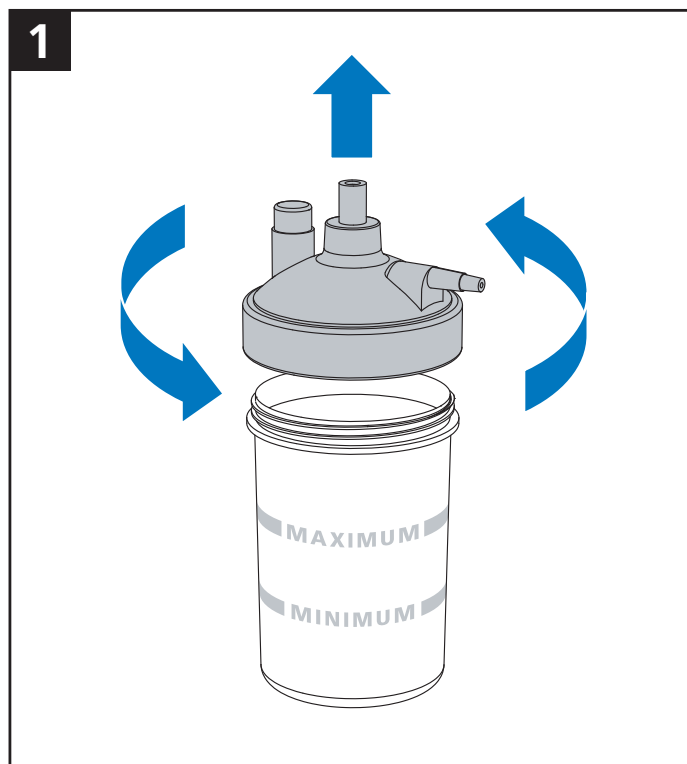

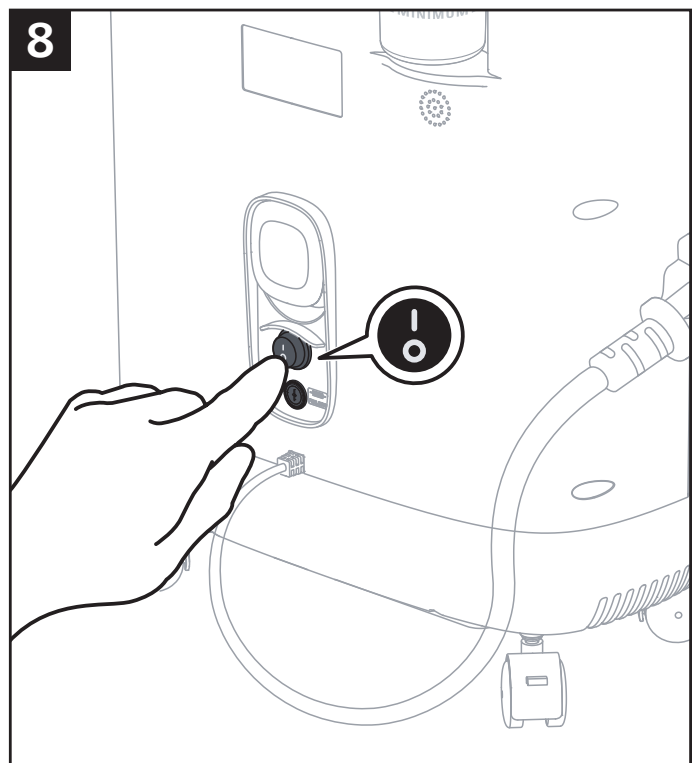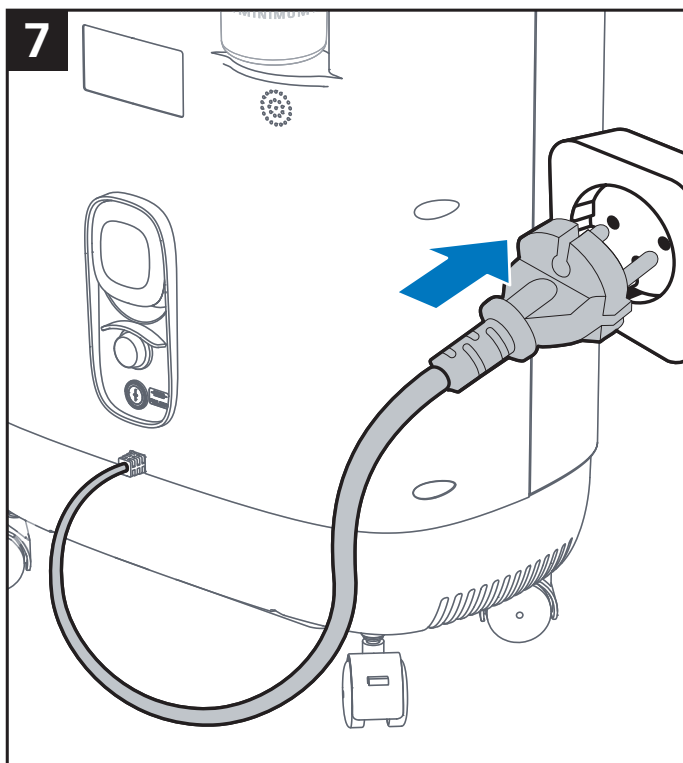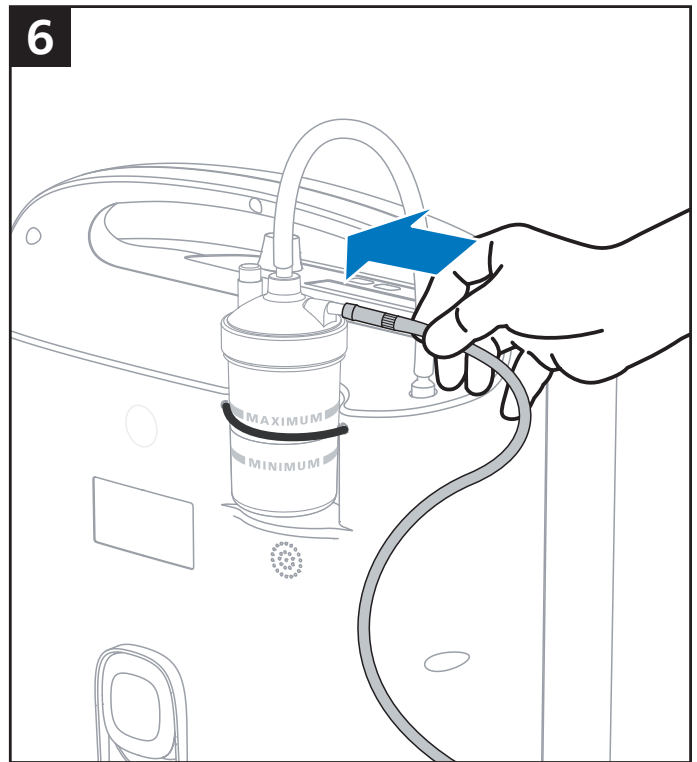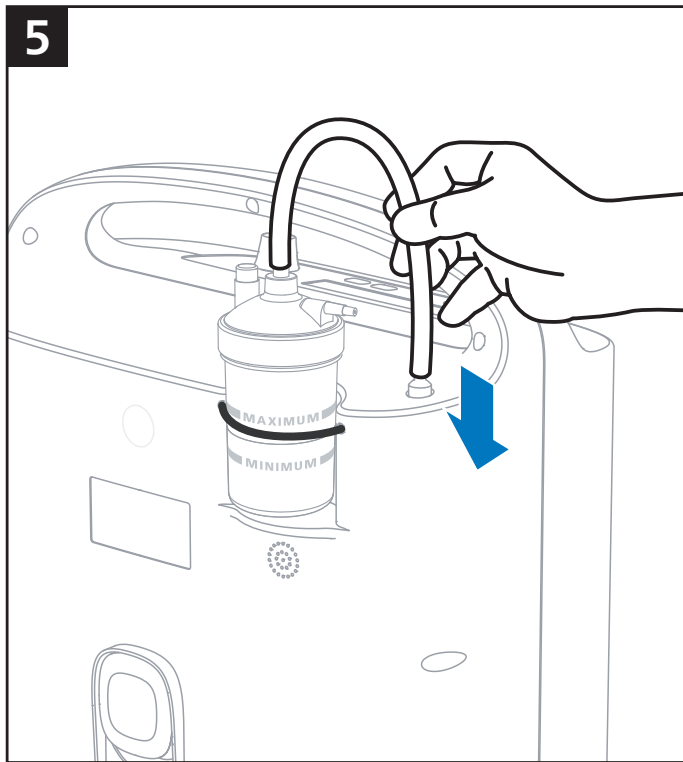

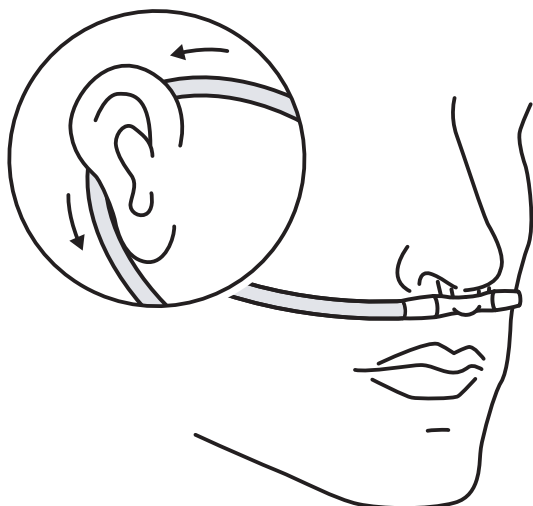9**DE** Tragen der Nasenkanüle**FR** Port de la canule nasale**EN** Wearing nasal cannula**IT** Utilizzo della cannula nasale**10****DE** Drücken Sie die Taste (⏻), um die Sauerstoffzufuhr zu starten.**FR** Appuyez sur le bouton (⏻) pour démarrer l'alimentation en oxygène.**EN** Press button (⏻) to start oxygen supply.**IT** Prema il pulsante (⏻) per avviare l'erogazione di ossigeno.**11****DE** Einstellen der Durchflussrate**FR** Ajustement du Débit**EN** Adjust Flowrate**IT** Regolazione della portata**12****DE** Drücken Sie die Taste (+ -), um den Timer einzustellen. Drücken Sie dann die Taste (⏻), um die Einstellung zu bestätigen.**FR** Appuyez sur le bouton (+ -) pour régler la minuterie. Ensuite, appuyez sur le bouton (⏻) pour confirmer le réglage.**EN** Press (+ -) to set timer. Then press (⏻) to confirm the setting.**IT** Prema il pulsante (+ -) per impostare il timer. Poi prema il pulsante (⏻) per confermare l'impostazione.