



Pflegewanne MK Aurelia Detailansicht Montageplatte 400x400 mm

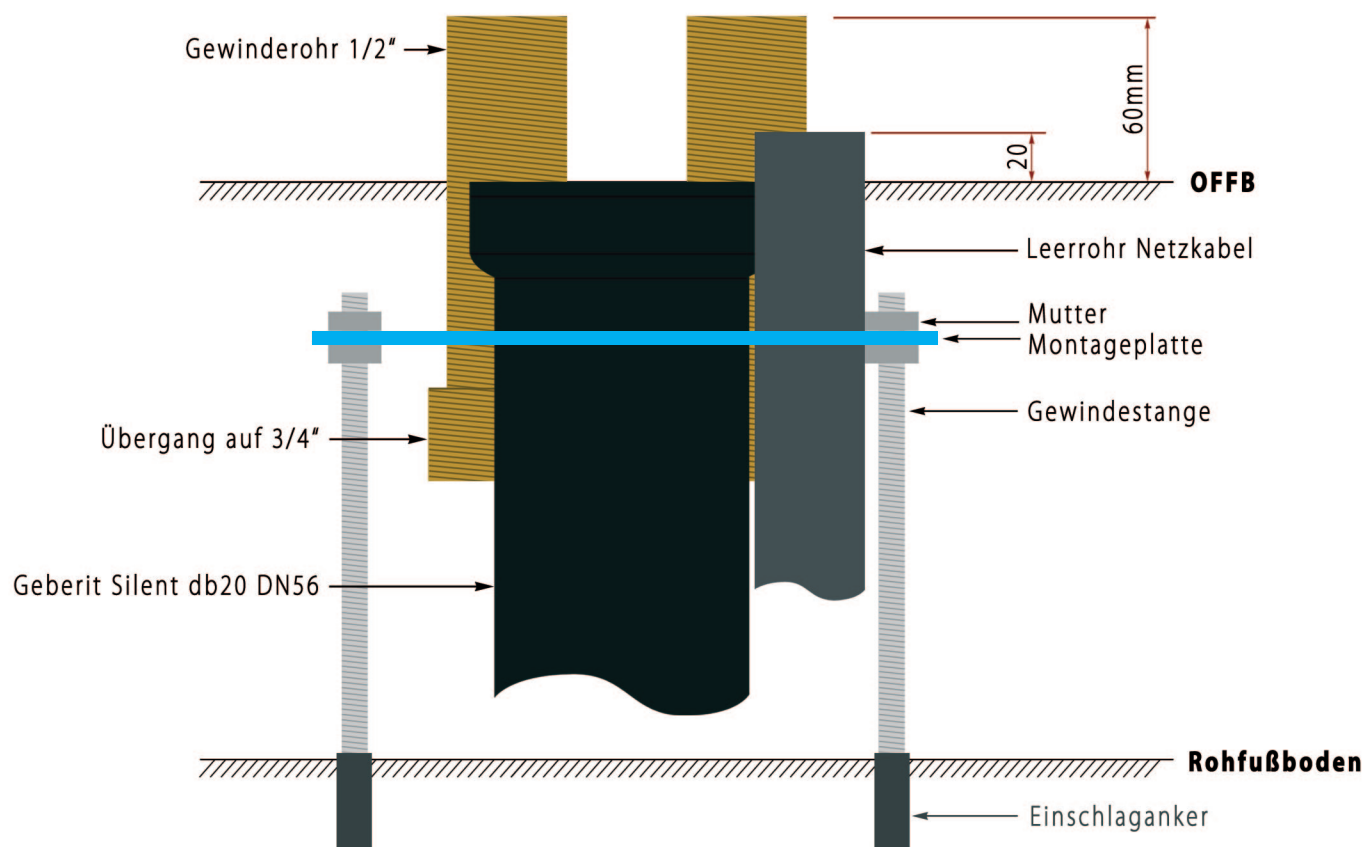


Pflegewanne MK Aurelia
Detailansicht Montageplatte 400x400 mm

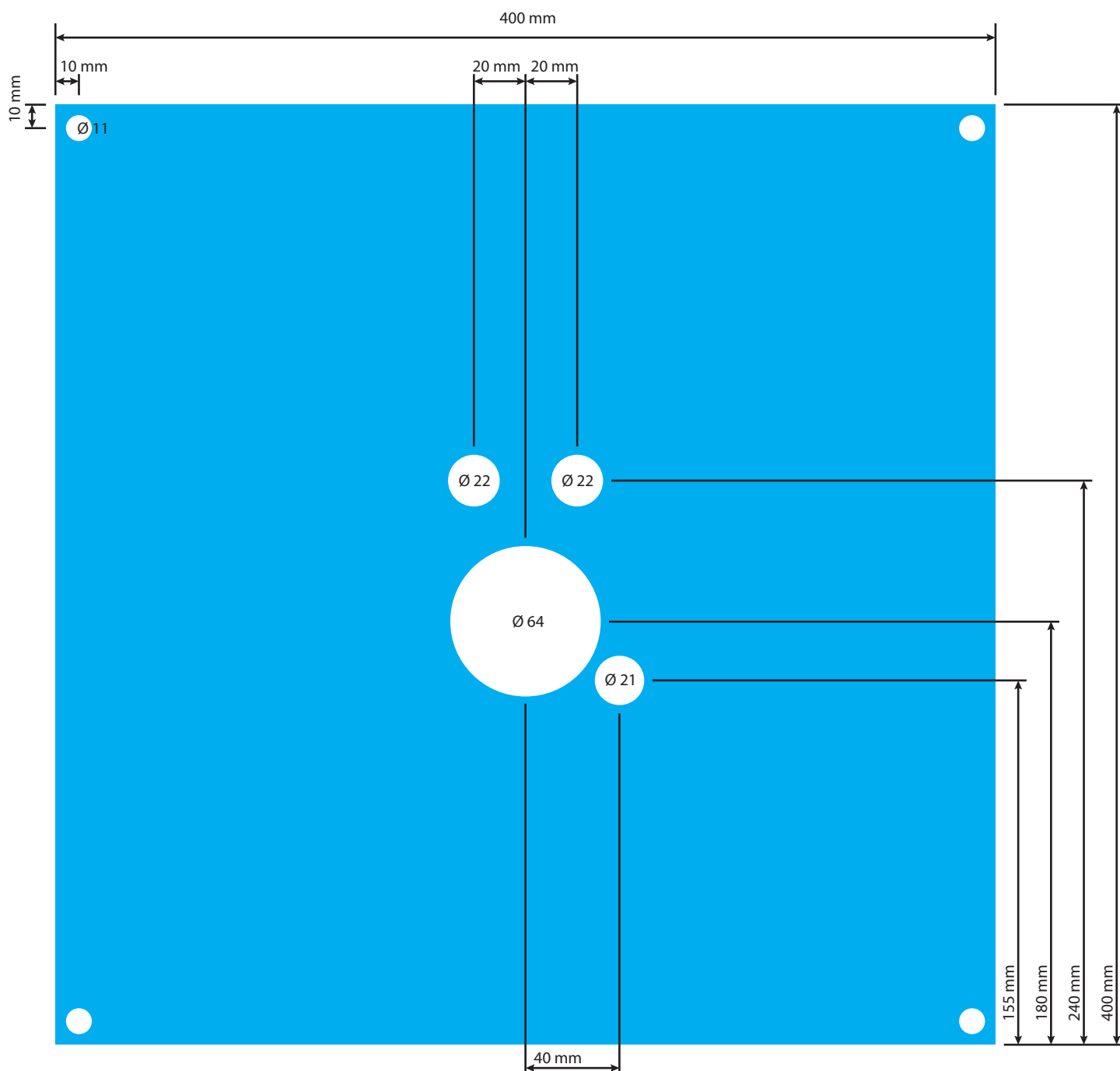


Pflegewanne MK Aurelia Anschlussplan Schweiz Bodenanschluss verdeckt

Anschluss Seite

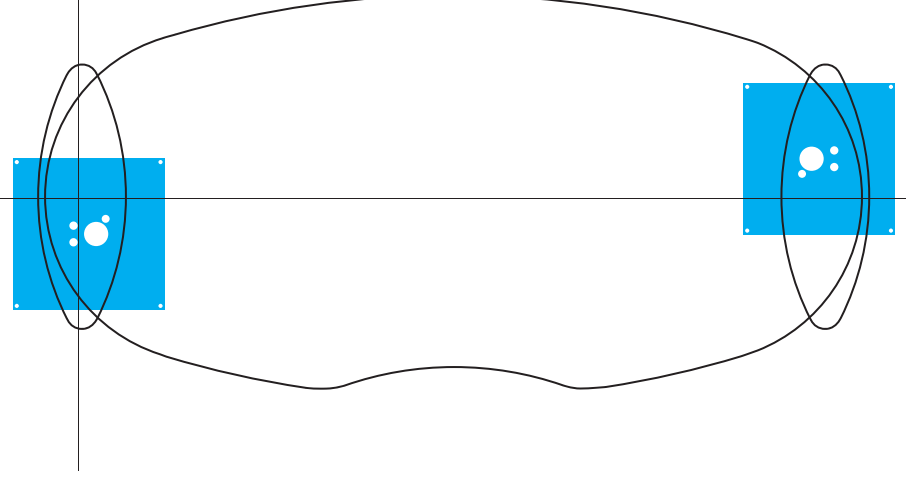

Alternativer Anschluss (um 180° gedreht)

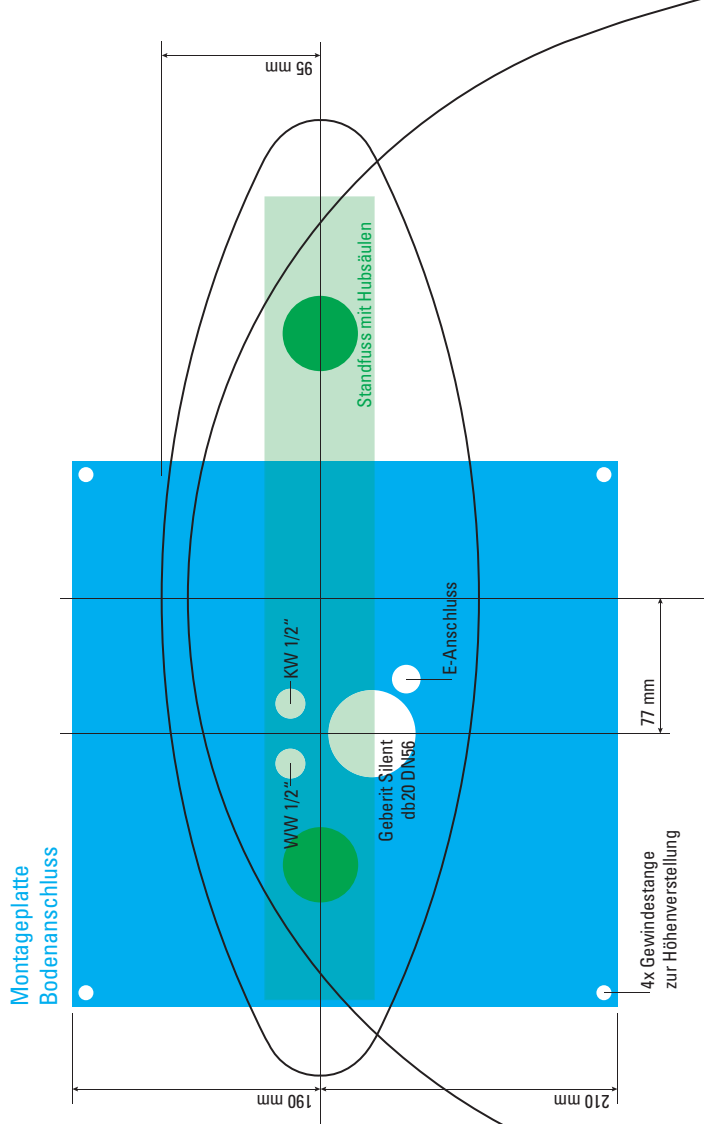

Bauseitige Absperungen WW / KW zwingend erforderlich! Bitte mittels gut zugänglichen Wandventilen lösen. Keine Abstellorgane auf den Wasserleitungen anbringen, da im Wannenfuss kein Platz für diese vorhanden ist.

Anschlussleitung H07RNF 3x1,5. Länge ab Oberkante fertiger Fussboden 2,5 m.

Eine Schaltmöglichkeit zur Stromunterbrechung in den Räumlichkeiten wird empfohlen.

Wichtig: Die Montageplatte muss 100% im Lot sein. Hier besteht keine Toleranz für Abweichungen.