





Name des Patienten: _____



Wohnhaft _____

Körpermaße am Patienten abmessen, der in achsgerechter Sitzhaltung möglichst in einem Rollstuhl sitzt.
 Dabei Fußstützen richtig einstellen.

Körpermaße

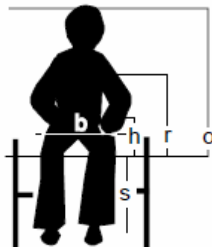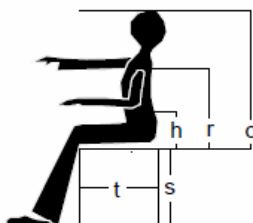

Rollstuhl-Abmessungen

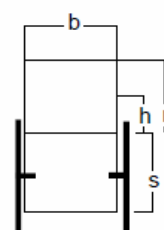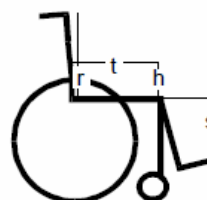

Körpermaße (cm)

Rollstuhl-Abmessungen (cm)

(b) Sitzbreite:			+ 5 cm	=		
(t) Sitztiefe:			./. 6-8 cm	=		
(s) Unterschenkel:			./. 2-3 cm	=		
(r) Rückenhöhe:			./. 10 cm	=		
(h) Armlehnenhöhe:			+ 3 cm	=		
(o) Oberkörperhöhe						

Körpergröße cm Körpergewicht