

Holztoilettenstühle



BRAUN Stuhl- und Tischfabriken
Werk Bad Rappenau
Guttenberger Straße 7
74906 Bad Rappenau

Telefon 07264-91490
Telefax 07264-914988
E-Mail Info@stuhl-braun.de
Internet <http://www.stuhl-braun.de>



HMV-Nr. 33.40.04.1003
für 14 RAP

Modell Rustica 14 F3 kakao

- aus heimischem, 2-fach lackiertem Buchenholz
- Polstersitz Farbe kakao-braun
- Kunststoffbrille mit integriertem Topfhalter
- Öffnungsdurchmesser ca. 29,5 cm
- Topfdeckelentnahme von oben
- Topfentnahme von hinten
- max. Belastung 100 kg
- nützliches Zubehör



| Technische Daten | Modell Rustica 14 |
|-----------------------|-------------------|
| Sitzhöhe Oberk. Sitz | ca. 47 cm |
| Lichte Armlehnebreite | ca. 46 cm |
| Sitzbreite | ca. 44 cm |
| Sitztiefe | ca. 41 cm |
| Größte Breite | ca. 59 cm |
| Gesamthöhe | ca. 85 cm |
| Gewicht ohne Topf | ca. 8,8 kg |
| Maximale Belastung | 100 kg |



Kunststoffbrille
mit Topfhalterung
in einem Element
Öffnungs - Ø
29,5cm

Variante

Modell Rustica 14 F3 RAP kakao
Mit Rücken und Armlehnepolster
Holzfarbe F3 mittelbraun mit kakao-
braunen Polsterteilen

Variante

Modell Rustica 14 F1 blau
Holzfarbe natur mit blauem Polstersitz



Variante

Mod. 9990 0005
Topfentnahme
von oben mit
rahmenfestem
Stahl-Topfhalter,
Brille ist
abnehmbar

(werkseitige
Montage)



Zubehör

Modell 250
Gepolsterte Brillenauflage mit
Schlaufen, abwaschbar



Zubehör

Modell 255
Warmsitzauflage
zum Auflegen auf die Brille,
30° waschbar



Variante

Stahltopfhalterung
Brille ist fest verschraubt

(werkseitige Montage)



Variante

Modell 075 Luxusitz
Kakaofarben mit 3 cm dickem
Polsterschaum
(werkseitige Montage)



Zubehör

Modell 2000 0020
Kunststoffauflage oval zur
Öffnungsverkleinerung
auf 20 x 29,5 cm



Variante

Polsterbrille SBO11 oval 19,5 x 29cm
mit rahmenfestem Topfhalter,
Polsterfarbe kakao-braun
(werkseitige Montage)



Zubehör

Modell 0100 1352
Fußverlängerung
aus kunststoff-
beschichtetem
Stahl
Verlängerung um
max. 8cm

auch als
Nachrüstsatz
erhältlich

Qualitätsstandard

Dieser Holztoilettenstuhl zeichnet sich durch einen hohen Sicherheitsstandard sowie durch eine hochwertige Verarbeitung aus. Eine strenge Fertigungskontrolle wird von geschultem Personal durchgeführt. Bei der Konstruktion kommen nur beste Rohstoffe zum Einsatz, die durch eine strenge Wareneingangskontrolle geprüft werden. So wird sichergestellt, dass nur bestens verarbeitete und geprüfte Qualitätsprodukte unser Haus verlassen. Dies wird noch unterstrichen durch die Sicherheitsnachweise der staatlichen Prüfstellen.

Ausführung und Beschaffenheit

Dieser Holztoilettenstuhl ist aus massivem, künstlich getrocknetem heimischen Buchenholz mit ca. 8 % Endfeuchtigkeit mit Dübel- und Zapfenverbindungen mittels wasserfestem KPVAC-Leim verleimt, wodurch eine sehr stabile und beanspruchbare Konstruktion erreicht wird. Die Oberfläche ist vollkommen formaldehydfrei mit 2-Schicht-DD-Lack ummantelt. Der von uns eingesetzte Lack hat eine Prüfungszulassung für den klinischen Bereich und den Kindergartenbereich.

Polsterung

Der Polstersitz ist mit einer erstklassigen, leicht zu reinigenden und desinfizierbaren Polyesterfolie bezogen. Ober- und Unterseite sind wasserdicht miteinander verschweißt. Es werden FCKW-freie Schäume als Polstereinlage verwendet.

Dieses Produkt ist ohne geeignetes Hygienekonzept nicht für den Wiedereinsatz freigegeben.

BRAUN Stuhl- und Tischfabriken
Werk Bad Rappenau
Guttenberger Straße 7
74906 Bad Rappenau

Telefon 07264-91490
Telefax 07264-914988
E-Mail Info@stuhl-braun.de
Internet <http://www.stuhl-braun.de>



HMV-Nr. 33.99.00.0002



BRAUN-Hygienetopf ist DBGM-gesichert u. nur über die Fa. BRAUN zu beziehen

Modell 232 Farbe braun

Modell 234 Farbe metallicgrau

- Die abgeschrägte Randzone bietet keine Angriffsfläche für Schmutz oder Bakterien und ermöglicht ein müheloses und perfektes Reinigen des Topfes.
- Der Antiresonanzboden senkt den Geräuschpegel weitgehendst und die Intimsphäre des Patienten bleibt erhalten.
- Die Geruchsbindung erfolgt durch den Vakuumverschluss des Deckels.
- Der BRAUN Hygiene-Topf kann in allen gängigen Topfhalterungen verwendet werden.
- Topf und Deckel sind aus schlagfestem und hitzebeständigem Material gefertigt.


Weitere Produkte aus unserem Angebot - bitte fordern Sie Unterlagen an



Metalltoilettenstühle



Toiletten-
Aufstehhilfen

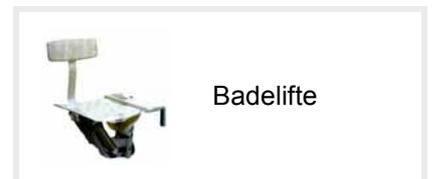

Badelifte



Sonderbau-
Toilettenstühle



Bettische,
Vielzwecktische



Pflegestühle
mit vielfältigem
Zubehör

BRAUN Stuhl- und Tischfabriken
Werk Bad Rappenau
Guttenberger Straße 7
74906 Bad Rappenau

Telefon 07264-91490
Telefax 07264-914988
E-Mail Info@stuhl-braun.de
Internet <http://www.stuhl-braun.de>



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch