

ADS *basic* – Homecare

- 3-Wege-Wechseldrucksystem
- Sitzendruckreduzierung
- feste Zykluszeit von 10 Minuten
- optischer Alarm für Niederdruck
- manuelle Druckregelung
- 3-Wege-Patientenaufgabe (Matratzenauflage-system) für Patienten von 20-180 kg
- CPR-Funktion
- Snap-Sicherheitsbefestigung
- Transportschlauch-Verschlussfunktion
- sehr dehnfähiges, Scherkraft verminderndes Schutzcover
- flüssigkeitsundurchlässiges Cover
- atmungsaktiv
- Low-Airloss-Zellen (optional)
- **Hilfsmittel-Nummer: 11.29.04.1015**

Optional: Kopfkissenfunktion.



Die AirMed^{PLUS} GmbH ist mehrfach ausgezeichnet, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Auflagen für das ADS *basic*

- CPR-Schnellentlüftung
- Transportfunktion
- Cover ist wasserundurchlässig von oben und atmungsaktiv von unten
- Zweidimensional dehnbares Cover bei 1. und 2.
- Optional für 1. und 2.: Cover mit Seitenschutzbegrenzer
- Optionale für 1. und 2.: Low-Air-Loss-Zellen zur Klimaverbesserung

Ausfallsicherheit

- Qualität verspricht Funktionssicherheit
- Keine Ausfallzeiten durch einfache Defekte
- Einzelne austauschbare Luftzellen
- Knickgeschützte Schlauchleitungen
- Alarmfunktion für Leckage

Auflagen-Modulsystem

- 12,5 cm hohes Matratzen-Auflagesystem (90 x 200 cm), bis 180 kg Patientengewicht, optional mit Low-Air-Loss Zellen
- 20 cm hohes Matratzen-Ersatzsystem (90 x 200 cm), bis 210 kg Patientengewicht, optional mit Low-Air-Loss Zellen

- 25 cm hohes bariatrisches Matratzen-Ersatzsystem (90 x 200 cm), bis 250 kg Patientengewicht
- Sitzkissen (40 x 40 cm), bis 180 kg Patientengewicht

Typ 1

Standard-Patientenauflage, Matratzen-Auflagesystem, 20-180 kg Körpergewicht



Typ 1ES


Matratzen-Ersatzsystem, mit Tasche für Schaumstoffeinlage, 40-210 kg Körpergewicht



Bild zeigt optionale Seitenschutzbegrenzer

Typ 3

Bariatrisches Matratzen-Ersatzsystem, 70-250 kg Patientengewicht

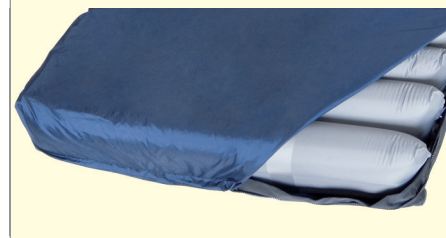

Bettbefestigung bei Typ 1 und Typ 2




Matratzen-Befestigungsvorrichtung über Spanngurte beim Typ 1




CPR-Notfall-Schnellentlüftung



Low-Air-Loss-Zellen

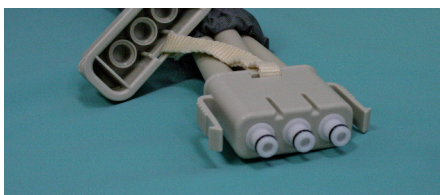

Codierung des Anschluss-Steckers

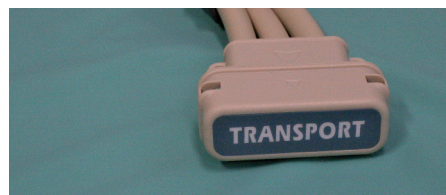

Transportverschluss – so bleibt die Patientenauflage beim Transport gefüllt