




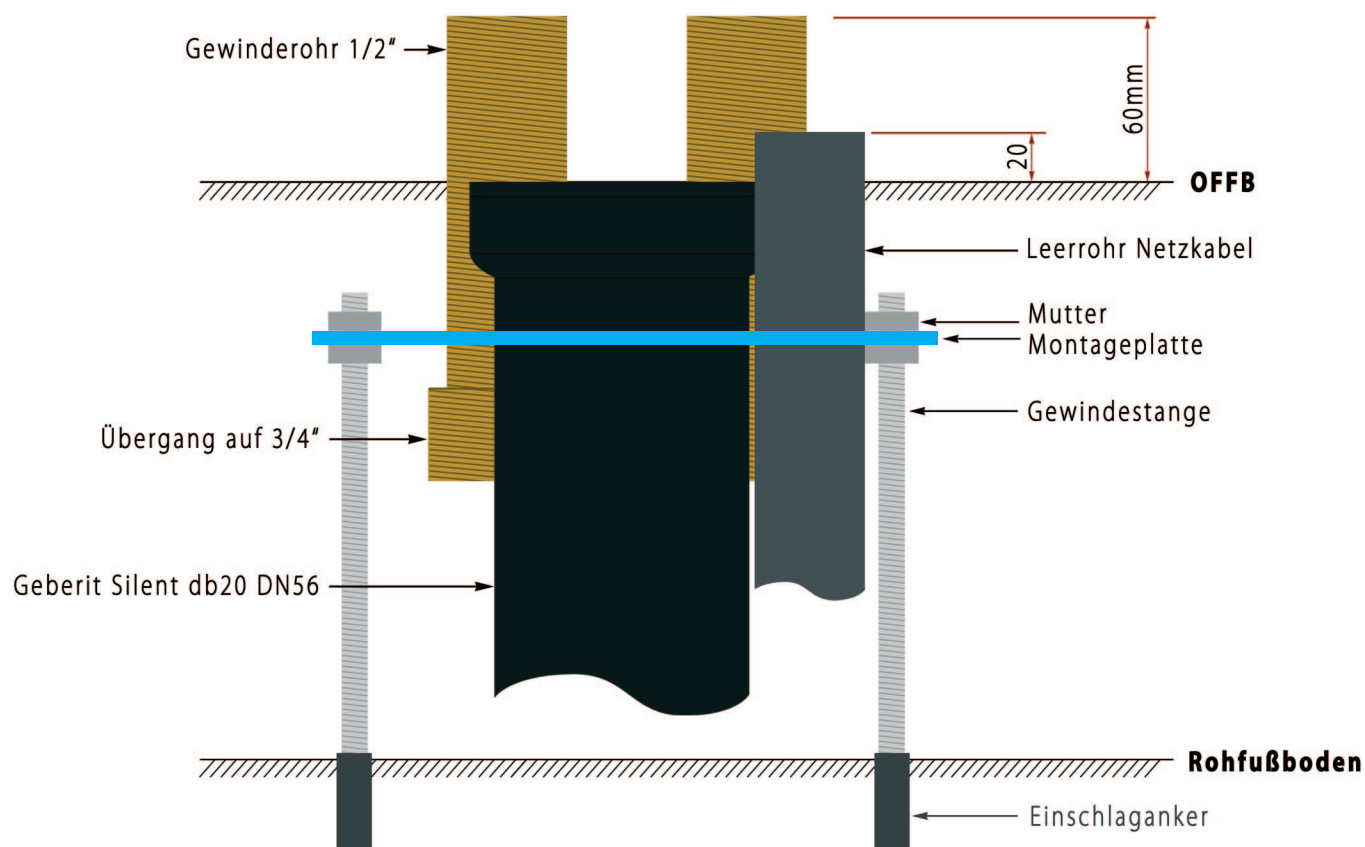


Pflegewanne MK Aurelia Detailansicht Montageplatte 400x400 mm

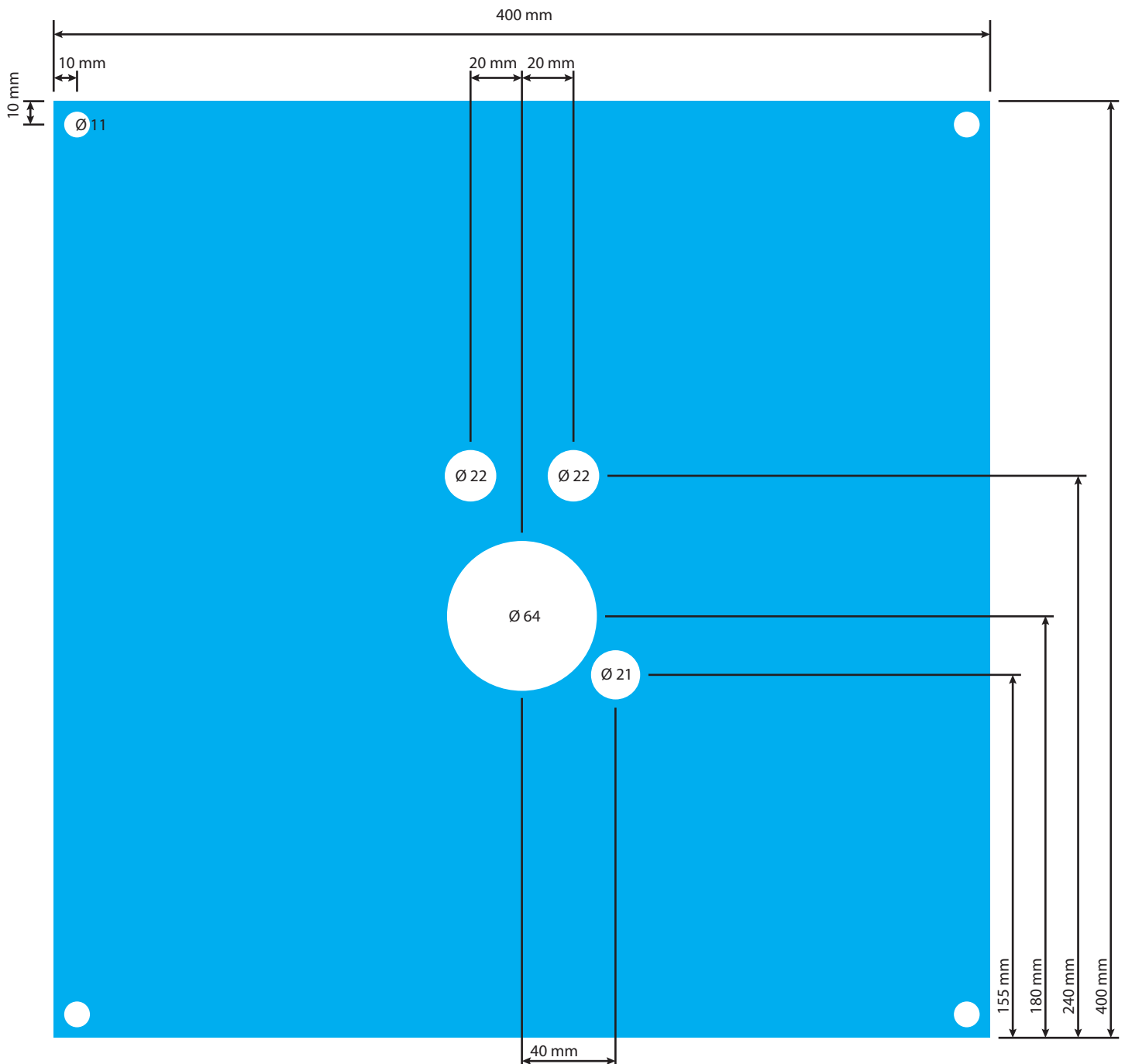


Pflegewanne MK Aurelia **Anschlussplan Schweiz** **Bodenanschluss verdeckt**

Anschluss Seite

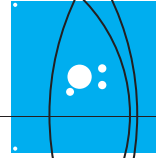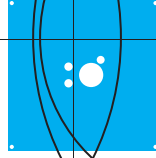

Alternativer Anschluss (um 180° gedreht)

Montageplatte
Bodenanschluss

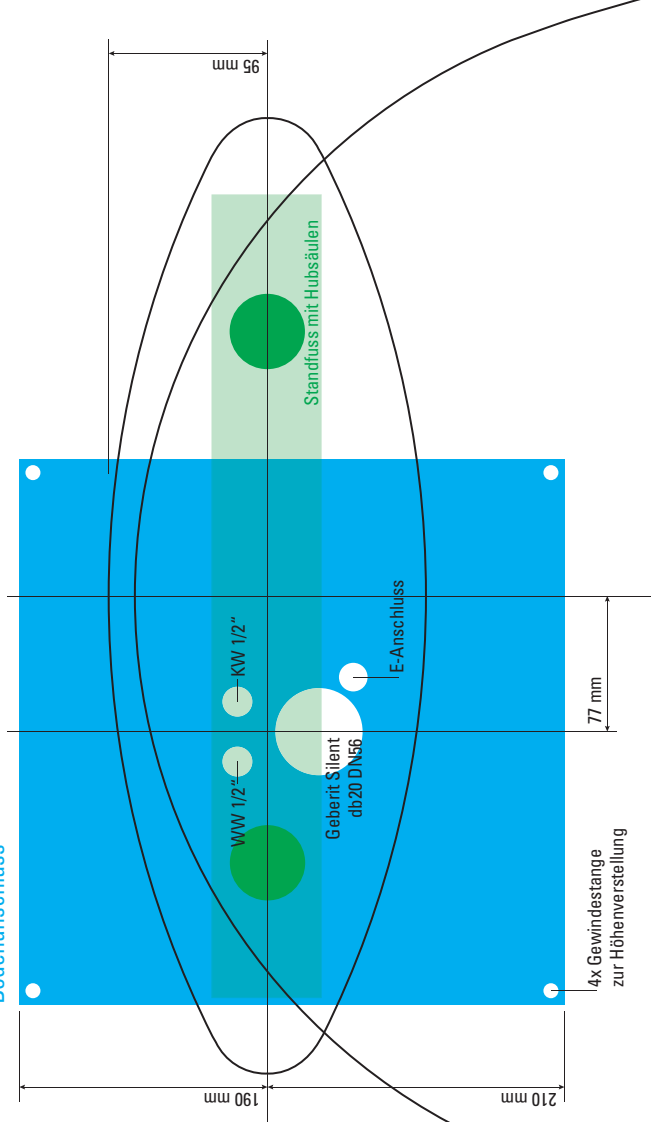

Kuhn und Bieri AG

Sägestrasse 75, 3098 Köniz
 Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71
 info@kuhnbieri.ch

kuhnbieri.ch



Bauseitige Absperungen WW / KW zwingend erforderlich! Bitte mittels gut zugänglichen Wandventilen lösen. Keine Abstellorgane auf den Wasserleitungen anbringen, da im Wannenfuss kein Platz für diese vorhanden ist.

Anschlussleitung H07RNF 3x1,5. Länge ab Oberkante fertiger Fussboden 2,5 m.

Eine Schaltmöglichkeit zur Stromunterbrechung in den Räumlichkeiten wird empfohlen.

Wichtig: Die Montageplatte muss 100% im Lot sein. Hier besteht keine Toleranz für Abweichungen.