




medisun® UV-Therapie

FÜR DIE ANWENDUNG ZUHAUSE UND IN ARZTPRAXEN

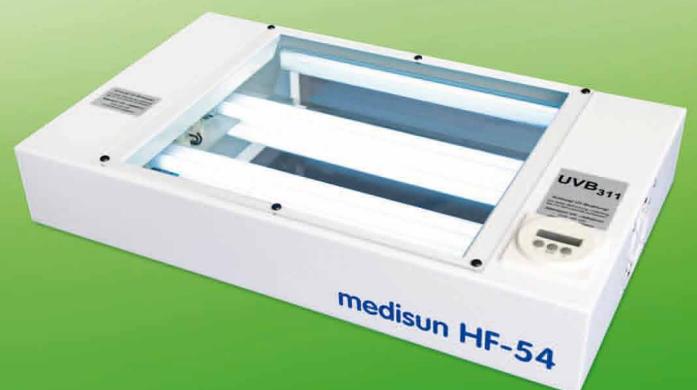

medisun® 700

PREISWERTE GANZKÖRPERTHERAPIE

medisun® 700 ist ein sehr preisgünstiges Ganzkörper-UV-Therapiegerät. Die Behandlung erfolgt jeweils im Liegen, Stehen oder Sitzen – dies wird durch das schwenkbare und höhenverstellbare Stativ ermöglicht. Aufgrund der leistungsstarken 100W UV-Lampen ergeben sich kurze Belichtungszeiten und gute Therapieerfolge.

Durch die wahlweise Bestückung mit verschiedenen UVA- und UVB-Spektren können praktisch alle bekannten UV-sensitiven Hautkrankheiten erfolgreich behandelt werden. Das Gerät benötigt kaum Platz und kommt mit einer Standard 230V-Schukosteckdose aus.

BESONDERE MERKMALE:

- Variable Lampenbestückungen für verschiedene Therapien
- Therapie im Stehen, Liegen und Sitzen
- Kurze Belichtungszeiten durch Hochleistungslampen
- Fahrenbares und platzsparendes Schwenkstativ
- Ein Schutzgitter schützt vor Kontakt mit den Lampen und verhindert Leistungsverluste, welche in der Regel bei geschlossenen Scheiben auftreten
- Elektronische Zeitsteuerung mit Dosis-Zeittabelle
- Gasdruckfeder mit stufenloser Höhenverstellung
- Zeitbegrenzung und Sicherheitsabschaltung
- Anwenderfreundliche Bedienung
- Ergonomische Gestaltung
- Automatische Abschaltung am Ende der Belichtungszeit
- Einfache Reinigung der Lampen
- Große Belichtungsfläche (ca. 180x60 cm)

LAMPENBESTÜCKUNG

UV-Spektrum	UV-Lampen	Art-Nr.
(P)UVA	7x100W	3291
UVB ₃₁₁	7x100W	3292
UVB _{3,1%}	7x100W	4104



Produktvideo unter www.medisun.de



medisun® HF-54

EFFIZIENTE PHOTOTHERAPIE DER HÄNDE UND FÜßE

Das **medisun® HF-54** ist ein UV-Lampenmodul, welches speziell für die Behandlung chronischer Hautkrankheiten der Hände oder Füße entwickelt worden ist. Je nach verwendetem UV-Spektrum eignet sich **medisun® HF-54** insbesondere zur Therapie der Psoriasis, Neurodermitis, Vitiligo und einiger anderer Indikationen. Sowohl eine UVB-Schmalbandtherapie mit 311 nm-Lampen als auch

die PUVA-Therapie mit UVA-Lampen sind problemlos möglich. Die integrierte elektronische Zeitschaltuhr sorgt für ein automatisches Abschalten der zuvor eingestellten Belichtungszeit am Ende der Bestrahlung.

medisun® HF-54 kann direkt auf einen Tisch zur Behandlung der Hände oder auf den Boden zur Behandlung der Füße gestellt werden.

BESONDERE MERKMALE:

- Optimale Homogenität durch Hochglanzreflektor zur Intensitätsverstärkung
- Elektronische Zeitschaltuhr mit automatischer Abschaltung am Ende der Belichtungszeit
- Gezielte Behandlung der Hände und Füße
- Stabiles Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
- Zur Anwendung auf dem Tisch oder auf dem Boden
- 2 UV-Hochleistungslampen
- Auflagefläche aus UV durchlässigem Acryl
- Geringe Wärmebelastung
- Mehrere Module für Hände und Füße kombinierbar
- Individuelle werkseitige UV-Vermessung
- Patienten UV-Schutzbrille inklusive
- Dosis-Zeit-Tabelle inklusive

LAMPENBESTÜCKUNG

UV-Spektrum	UV-Lampen	Art-Nr.
UVA	2x36W	8281
UVB ₃₁₁	2x36W	8280



Produktvideo unter www.medisun.de



medisun® Psori-Kamm

EFFIZIENTE PHOTOTHERAPIE DER KOPFHAUT UND KLEINEN HAUTPARTIEN

medisun® Psori-Kamm ermöglicht die gezielte Belichtung kleiner Hautpartien, z. B. an Händen, Ellbogen, Kniekehlen usw. Die Kammreihe dient als Abstandshalter und kann bei Bedarf auch abgenommen werden.

Umfassendes Zubehör inklusive

Der medisun® Psori-Kamm wird in einem gepolsterten Transportkoffer, mit ausführlicher Gebrauchsanweisung, einer UV-Schutzbrille und einem Countdowntimer geliefert. Mithilfe der mitgelieferten Dosis-Zeit-Tabelle kann eine

sekundengenaue und reproduzierbare Dosierung erreicht werden. Durch das externe Steckervorschaltgerät ist das Lampenmodul sehr leicht und lässt sich besonders gut bei der Kopfhautbehandlung führen.



Der gepolsterte Transportkoffer ist praktisch und komfortabel.

LAMPENBESTÜCKUNG

UV-Spektrum	UV-Lampen	Art-Nr.
UVA	1x9W	3810
UVB	1x9W	3756
UVB ₃₁₁	1x9W	3757



Produktvideo unter www.medisun.de



medisun[®] 250

VIELSEITIGE TEILKÖRPERTHERAPIE

Das kompakte Teilkörpersystem medisun[®] 250 ermöglicht universellen Einsatz und unzählige Behandlungsmöglichkeiten. Durch das fahrbare Schwenkstativ können die Behandlungen sehr bequem im Liegen, Stehen oder Sitzen durchgeführt werden.

Die Einstellung der Belichtungszeit erfolgt über eine integrierte elektronische Zeitschaltuhr mittels Dosistabelle. Durch das große Belichtungsfeld von 60 x 40 cm können neben den gut zugänglichen Hautpartien auch die Füße, Hände und sogar der Kopf gut behandelt werden.

BESONDERE MERKMALE:

- Variable Lampenbestückungen für verschiedene Therapien
- Therapie im Stehen, Liegen und Sitzen
- Kurze Belichtungszeiten durch Hochleistungslampen
- Elektronische Zeitsteuerung mit Dosis-Zeittabelle
- Gasdruckfeder mit stufenloser Höhenverstellung
- Fahrbares und platzsparendes Schwenkstativ
- Zeitbegrenzung und Sicherheitsabschaltung
- Anwenderfreundliche Bedienung
- Ergonomische Gestaltung
- Schutzglas schützt vor Kontakt mit den Lampen
- Automatische Abschaltung am Ende der Belichtungszeit
- Einfache Reinigung

LAMPENBESTÜCKUNG

UV-Spektrum	UV-Lampen	Art-Nr.
(P)UVA	4x40W	5424
UVB ₃₁₁	4x20W	5425
(P)UVA	7x40W	5420
UVB ₃₁₁	7x20W	5427



Produktvideo unter
www.medisun.de



medisun® 700 / 250 / HF-54 / Psori-Kamm

Exakte Dosierung

Die integrierte elektronische Zeitsteuerung (außer Psori-Kamm) erlaubt eine sekundengenaue Einstellung der Behandlungszeit. Nach Ablauf der vorgewählten Belichtungszeit werden die Lampen automatisch abgeschaltet. Dadurch werden Überdosierungen sicher verhindert. Bei Unterbrechen der Behandlung wird die verbleibende Belichtungszeit gespeichert.

Kurze Belichtungszeiten


Die hohe UV-Intensität der medisun® Hochleistungslampen sorgt für kurze Behandlungszeiten. Eine UV-Patientenschutzbrille ist immer im Lieferumfang enthalten.




TECHNISCHE DATEN

	700	250	HF-54	PSORI-KAMM
				
ABMESSUNGEN in cm	B 85 x T 65 x H 195	L 72 x T 52 x H 10	L 53 x T 33 x H 8,2	L 27 x T 5,0 x H 5,2
GEWICHT	ca. 48kg	ca. 25kg	ca. 8,0kg	ca. 0,9kg
NETZANSCHLUSS	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
UV-LAMPEN	7 x 100W	4 / 7 x 20W / 40W	2 x 36W	1 x 9W
ZERTIFIZIERUNG	CE 0197	CE 0197	CE 0197	CE 0197
WEEE-REG.-NR.	DE 91065138	DE 91065138	DE 91065138	DE 91065138


Technische Änderungen vorbehalten.

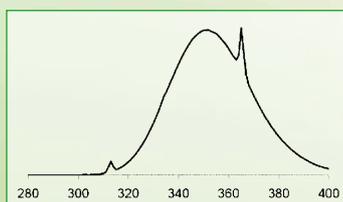

UVA

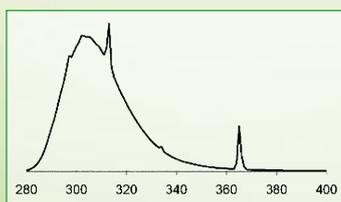

UVB

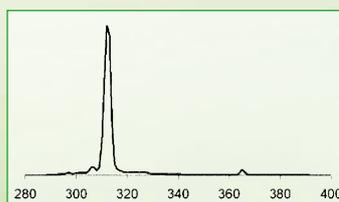

UVB₃₁₁