



medisun[®] 2800 Innovation

PROFESSIONELLE GANZKÖRPER-PHOTOTHERAPIE



**Das innovative UV-Bestrahlungsgerät
für die Behandlung aller
UV-sensitiven Hautkrankheiten**

medisun® 2800 Innovation

PROFESSIONELLE GANZKÖRPERPHOTOTHERAPIE

medisun® 2800 Innovation ist ein UV-Bestrahlungsgerät für die Behandlung aller UV-sensitiven Hautkrankheiten. Die Bedienung und Steuerung erfolgt durch einen Touchscreen-Panel-PC im Türmodul. Es können UVA-, UVB₃₁₁ – oder kombinierte Belichtungen durchgeführt werden. Die Patienten stehen während der Belichtung in der Mitte der UV-Kabine. Die UV-Lampen sind gleichmäßig rundum angeordnet, so dass eine homogene Dosierung gewährleistet ist. Die Tür kann wahlweise links oder rechts montiert werden.



- 20, 24, 28, 44 oder 48 UV-Lampen à 100 Watt
- UVB₃₁₁-, (P)UVA-, UVA1 oder Mischbestückung
- Integrierte PC-Steuerung mit großem 10,4“ Color-Touch-Screen-Monitor
- Medisoft Therapiemanagement
- Dosissteuerung mit Dosisvorwahl in J/cm²
- 2-fach Patientenbelüftung
- 4 UV-Sensoren für redundante Permanentmessung
- Remote-Netzwerksteuerung, z.B. von der Rezeption
- Ambiente-Illumination mit Farbsteuerung (optional)
- Optimierte Lampenlüftungssystem
- Geringer Platzbedarf
- Acrylschutzglas vor den Lampen
- Pausenfunktion beim öffnen der Tür
- Visuelle Patientenüberwachung (optional)
- Türanschlag rechts oder links möglich
- 2 Haltestangen für Patienten
- Stabiles Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
- Color-Design – Farbapplikation passend zur Ihrer Klinik- oder Praxiseinrichtung

medisun® 2800 Innovation,
XXL-Variante



Produktvideo unter
www.medisun.de

WIRKSAME BEHANDLUNG VON PSORIASIS, NEURODERMITIS, VITILIGO UND ANDEREN HAUTKRANKHEITEN

medisun® 2800 Innovation ermöglicht die sichere und effiziente Behandlung des ganzen Körpers mit komfortabler Bedienung. Die Belichtungen erfolgen bequem im Stehen, wahlweise mit dem Standardinnenraum von 72 x 72 cm oder in der großzügigen XXL-Ausführung mit 90 x 90 cm.







KURZE BELICHTUNGSZEITEN

Die hohe UV-Intensität der medisun-Hochleistungslampen sorgt für kurze Behandlungszeiten. Im Lieferumfang sind bereits 5 Patienten-UV-Schutzbrillen und eine große Personal-UV-Schutzbrille enthalten.




Standardversion

XXL-Version

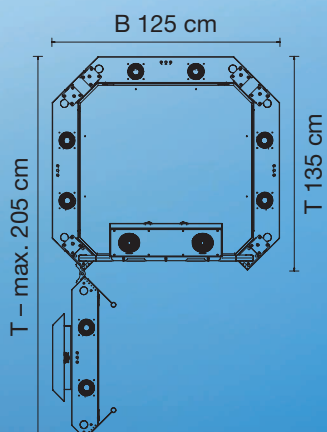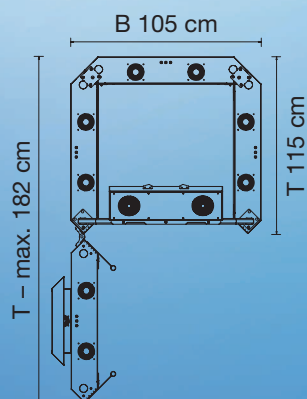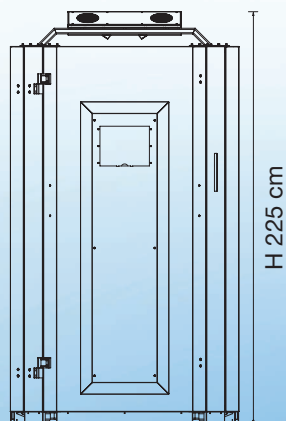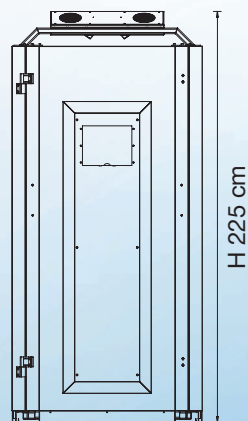


INDIKATIONEN

- Psoriasis (Schuppenflechte)
- Neurodermitis
- Vitiligo (Weißfleckenkrankheit)
- PUVA-Therapie
- Polymorphe Lichtdermatose (PLD)

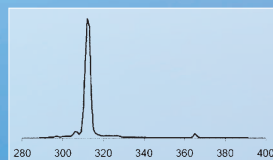

UVB₃₁₁

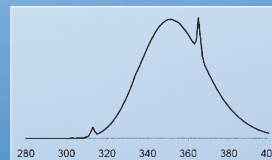

UVA

medisun® 2800 Innovation

INDIVIDUELLE FARBAKZENTE FÜR IHRE PRAXIS

medisun® 2800 Innovation können Sie ab sofort in Ihren bevorzugten Farbkombinationen bestellen!

Mehr Infos unter medisun.de



TECHNISCHE DATEN

	BESCHREIBUNG	
ABMESSUNGEN	B 105 cm x T 115 cm x H 225 cm (Standard), Innenmaße 72 x 72 cm B 125 cm x T 135 cm x H 225 cm (XXL), Innenmaße 90 x 90 cm	
LEISTUNG	2,5 bis 5,0 kW	
GEWICHT	320 bis 400 kg	
NETZANSCHLUSS	400 V / 3 x 16 A (44 UV-Lampen) 230 V / 1 x 16 A (bis 28 UV-Lampen)	
VERSIONEN	24 A (UVA-Mono, 24-UV-Lampen, Touch-PC, 230 V)	Art.-Nr. 1802
	20 B (UVB ₃₁₁ -Mono, 20-UV-Lampen, Touch-PC, 230 V)	Art.-Nr. 1710
	28 AB (UVA-/UVB ₃₁₁ , 28-UV-Lampen, Touch-PC, 230 V)	Art.-Nr. 1706
	44 A (UVA-Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7775
	44 B (UVB ₃₁₁ -Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7776
	44 AB (UVA/UVB ₃₁₁ , 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7777
	44 A XXL (UVA-Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7907
	44 B XXL (UVB ₃₁₁ -Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7908
	44 AB XXL (UVA/UVB ₃₁₁ , 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7909
OPTIONAL	Permanent-UV-Messung (4-Sensoren) medisoft-Therapiemanagement-Paket	
ZERTIFIZIERUNG	CE 0197	
WEEE-REG.-NR.	DE 91065138	

Technische Änderungen vorbehalten.



Kuhn und Bieri AG | Sägestrasse 75 | 3098 Köniz | 0848 10 20 40 | kuhnbieri.ch