

medisun[®] 2800 Innovation **PRO**

INNOVATIVE UV-THERAPIE FÜR DIE DERMATOLOGIE

Die innovative
UV-Bestrahlungskabine
für die optimierte
Behandlung UV-sensitiver
Hautkrankheiten



medisun® 2800 Innovation

PROFESSIONELLE GANZKÖRPER-PHOTOTHERAPIE

Die **medisun® 2800 Innovation** ist der neue technologische Standard für die Ganzkörper UV-Behandlung. Die Bedienung und Steuerung erfolgt durch einen integrierten Touch-PC mit UV-Sensor-Messung. UVA-, UVB-311 oder kombinierte Belichtungen können durchgeführt werden. Eine Ausstattung mit UVA-1 Spektrum ist ebenfalls möglich.




Die ergonomische Anordnung der 8 Module mit jeweils 5 UV-Lampen, bietet in Verbindung mit einer neu entwickelten Lampensteuerung, eine optimierte Dosisgenauigkeit im Vergleich zu herkömmlichen UV-Kabinen. Das neue Voice-System leitet den Patienten anwenderfreundlich durch den Belichtungsablauf.

Mit 200 cm langen UV-Lampen ausgestattet, bietet die **medisun® 2800 Innovation** eine homogene Belichtung von Kopf bis Fuß, auch bei sehr großen Patienten.



HIGHLIGHTS



- 40 UV Lampen in 8 Modulen
- 200 cm Lampenlänge für verbesserte Homogenität
- Mono oder Kombispektrum wählbar (UVB-311, UVA, UVA-1)
- Integrierte 10,4" Touch-PC Steuerung mit Dosisvorwahl in J/cm²
- Programmierbare Dosislimits
- Redundante Echtzeit UV-Sensorik (2-fach UVA – 2-fach UVB-311)
- Doppelflügeltür
- Belichtung mit offener Tür möglich (für claustrophobische Patienten)
- UV-undurchlässige Sichtfenster zur Patientenüberwachung
- Automatisches Anhalten der Belichtung bei Öffnen der Tür
- Startknopf und Not-Stop-Schalter im Innenraum
- Stufenlos einstellbare Patientenbelüftung mit 2 Ventilatoren
- LC-Display mit Anzeige der verbleibenden Belichtungszeit im Innenraum
- Stabiles Metallgehäuse (verzinkt Stahl/Alu) mit Kunststoffpulverbeschichtung
- Voice-System – Sprachausgabe zur Patienteninformation
- LED-Innenbeleuchtung
- Intelligentes geräuscharmes Lampenkühlsystem – 8 einzeln temperaturgeregelter Ventilatoren
- Hochglanz-Lampenreflektoren
- Acryl-Schutzscheiben vor den UV-Lampen
- 2 Handgriffe im Innenraum
- Metallpodest für maximale Stabilität
- 8 Laufrollen für leichtes Verschieben der Kabine
- Integriertes Staubfiltersystem
- Selbsttestdiagnosesystem
- Fernwartung via Teamviewer möglich
- Patienten Safety-System

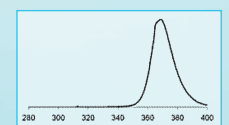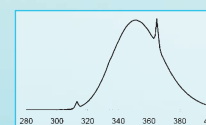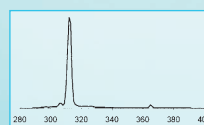

WIRKSAME UND EFFEKTIVE BEHANDLUNG VON UV-SENSITIVEN HAUTKRANKHEITEN

INDIKATIONEN

- Schuppenflechte (Psoriasis)
- Neurodermitis (atopische Dermatitis)
- Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)
- Polymorphe Lichtdermatose
- PUVA-Therapie (Balneophototherapie)
- und weitere Hautkrankheiten

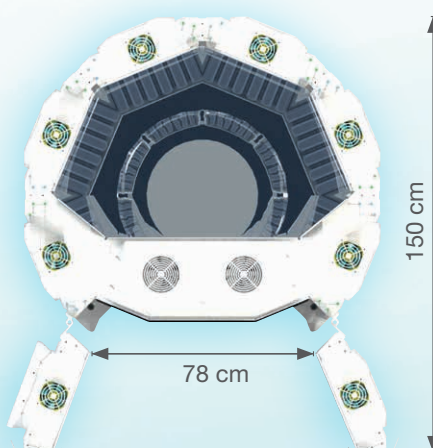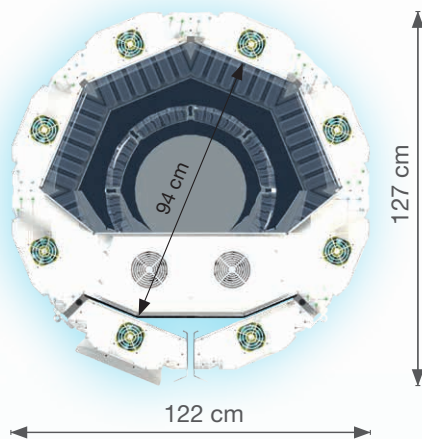

- **Optional:** Medisoft mit Remote-PC, Fernbedienung über Netzkabel, z.B. vom Empfang aus, automatische Dokumentation der Therapie in einer Patientendatenbank, ausdrückbare Therapieprotokolle, Therapiepläne

medisun® Color-Design

INDIVIDUELLE FARBAKZENTE IN ÜBER 80 FARBEN ERHÄLTlich

medisun® 2800 Innovation können Sie auf Wunsch mit Ihrer bevorzugten Farbapplikation passend zu Ihrem Klinik- oder Praxisambiente ohne Aufpreis bestellen!



Abb. ähnlich

TECHNISCHE DATEN

	BESCHREIBUNG	Art-Nr.
medisun 2800 Innovation	UVA + UVB-311, 40x2m-Lampen, 400V, 3x 16A, 3PH+N+PE, 50Hz	2201
medisun 2800 Innovation	UVA + UVB-311, 40x2m-Lampen, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60Hz	2202
medisun 2800 Innovation	UVB-311, 40x2m-Lampen, 400V, 3x 16A, 3PH+N+PE, 50Hz	2203
medisun 2800 Innovation	UVB-311, 40x2m-Lampen, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60Hz	2204
medisun 2800 Innovation	UVA, 40x2m-Lampen, 400V, 3x 16A, 3PH+N+PE, 50Hz	2205
medisun 2800 Innovation	UVA, 40x2m-Lampen, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60Hz	2206
medisun 2800 Innovation	UVA-1, 40x2m-Lampen, 400V, 3x 16A, 3PH+N+PE, 50Hz	2208
medisun 2800 Innovation	UVA-1, 40x2m-Lampen, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60Hz	2212
LEISTUNG	ca. 5.500W	
INNENRAUMABMESSUNG	Ø 94	
EINGANGSBREITE	ca. 78 cm	
GEWICHT	ca. 390 kg	
KLASSIFIZIERUNG	MDD-Klassifizierung IIa	
ZERTIFIZIERUNG	CE 0197	

Änderungen vorbehalten.